# BRUGSVEJLEDNING
## FØRSTEHJÆLPSUDSTYR

### Læs venligst før brug:

Denne folder indeholder brugsanvisninger for udvalgte produkter i sættet. Symboler, udløbsdato og yderligere produktinformation fremgår af de enkelte produkter.




GAZE

KOMPRIMERET GAZE

TOURNIQUET

ALUTÆPPE

TØJSAKS

# GAZE - TRYKFORBINDING




Placer gazepuden direkte på såret.




Placer elastikbindet rundt om såret med et fast tryk.

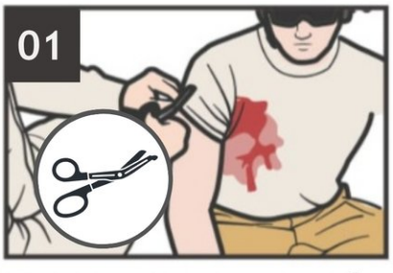



Fortsæt med at forbinde og holde tryk indtil forbindingen dækker hele gazen.




Fastgør bindet med lukkeklipsen.

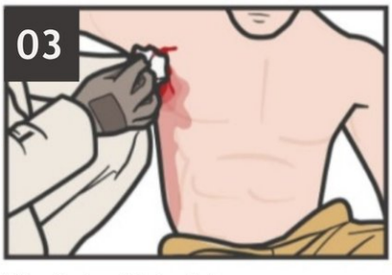
# KOMPRIMERET GAZE



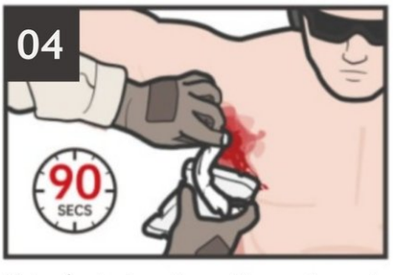

Klip tøjet med tøjsaksen, for at få adgang til såret.




Pak den komprimerede gaze ud, så du er klar til at pakke såret.



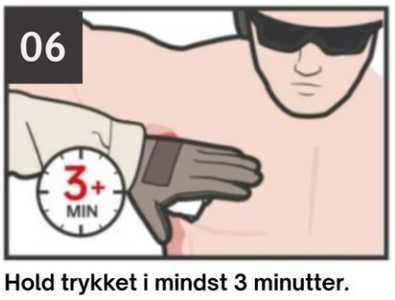

Stræk den tilskadekommens arm ud i 90° ved at placere den på din skulder.




Pak såret stramt med komprimeret gaze, indtil såret er fyldt (Hold i ca. 90 sekunder).




Sørg for, at gauzen stikker 1–2 cm ud.




Hold trykket i mindst 3 minutter.

# TOURNIQUET



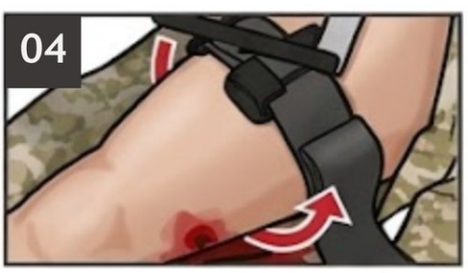

**Før remmen ned over - eller rundt om det tilskadekomne lemme, således at remmen kan spændes direkte ind mod huden.** *Benyt eventuelt tøjsaksen, for at få fri adgang til blødningen.*




**Placer tourniquettet 8–10 cm over blødningsstedet.**




**Før velcroremmen gennem spændet og stram til, så remmen sidder tæt hele vejen rundt.**




**Før velcroremmen bagom lemmet** *(væk fra spændet)* **og fastgør uden at blokkere spændet.**




**Vrid strammeren for at øge trykket, indtil blødningen stopper.**




**Fastgør strammeren i holderen.**




**Lås strammeren på plads ved at føre velcroremmen igennem holderen og fastne den på den anden side.**




**Påfør tidsstempel velcrobåndet.**




**Notér tidspunktet for påsætningen.**

**10 SØG PROFESSIONEL HJÆLP SÅ HURTIGT SOM MULIGT.**

## ADVARSEL

**Brug kun tourniquet ved livstruende blødninger.**

**Fjern ALDRIG selv tourniquet efter påsættelsen.**

## ALUTÆPPE



Beskytter mod vind og vand. Anvend som foreskrevet på emballagen.

## TØJSAKS



Benyttes til at klippe tøj væk fra skadesområdet, og må ikke benyttes til andet. Placer den stumme ende mod huden , for at undgå snitsår.

## GENERELLE OPLYSNINGER

Alle produkter er CE certificerede.

Udstyret er engangsbrug, medmindre andet fremgår af produktet.

Opbevares tørt og ved stuetemperatur.

Dette materiale erstatter ikke professionel lægehjælp. Søg professionel hjælp efter førstehjælp.

Denne vejledning er udarbejdet som en samlet dansk brugsvejledning for førstehjælpssættet. De enkelte produkter kan indeholde yderligere information på emballagen, som også bør følges.

**Ansvarlig virksomhed:**

**Thomsen Inno**
**CVR:** 45155048
**Addresse:** Ceresbyen 5C, 8000 Aarhus C, Denmark
**Email:** jakob@missionfoerstehjaelp.dk
**Telefon:** +45 60 18 00 98